ROLLATOR FUTURA

Manual del usuario



Asegúrese de leer y comprender este manual antes de utilizar el producto.

Abril 2015

CE

Índice **Página**

Introducción **3**

Uso al que está destinado **3**
Especificaciones técnicas **3**

Componentes **4**

Recomendaciones de seguridad **5**

Montaje **6 - 8**
- Plegado
- Desplegado
- Ajuste

Funcionamiento y ajuste de los frenos **9**

Mantenimiento **10**

Limpieza **11**

Garantía **12**

INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por haber adquirido el Rollator Futura. Este andador ha sido fabricado a partir de materiales de alta calidad y comprende un asiento, bolsa pequeña para la compra y frenos de bloqueo. Se puede ajustar la altura del manillar y el andador se pliega fácilmente para su transporte y almacenamiento.

USO AL QUE ESTÁ DESTINADO

Diseñado para ayudar al usuario a caminar, descansar y transportar pequeñas compras, tanto en interiores como en el exterior, sobre superficies planas por una única persona con movilidad reducida y con un peso máximo que se indica más adelante.
El usuario debe tener la capacidad física, visual y cognitiva necesaria para hacer funcionar el andador de forma segura. En caso de duda, consulte con el médico o con el vendedor del producto.
Es importante que el usuario lea y comprenda las recomendaciones de seguridad contenidas en este manual antes de utilizar el producto para evitar posibles daños al propio usuario o a los transeúntes, así como al andador o a otros objetos cercanos.

Especificaciones técnicas

Dispositivo médico – Clase 1

Altura total (Altura manillares)	79-92 cm
Anchura total	67 cm
Profundidad total	69 cm
Altura del asiento	53 cm
Altura andador plegado	36 cm
Profundidad plegado	66 cm
Anchura plegado	34 cm
Peso	7,5 kg
Peso usuario máximo	136 kg

COMPONENTES



1 – Respaldo
2 – Freno de funcionamiento /aparcamiento ajustable
3 – Superficie del asiento.
4 – Manillas de altura ajustable
5 – Ruedas delanteras orientables 200 mm.
6 – Bolsa de la compra

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Este andador ha sido diseñado para ser utilizado como asistente de movilidad y proporciona un elemento natural para que el usuario camine de forma segura con su peso asentado entre los manillares y el andador frente a él.



El usuario debe:

- Leer este manual atentamente antes de utilizar el andador
- Comprobar siempre que los frenos estén en posición de bloqueo cuando el andador no está siendo utilizado.
- Comprobar que todas las ruedas estén bien fijadas antes del uso
- Comprobar que los frenos funcionan correctamente
- Comprobar que el ajuste de altura del manillar es el correcto antes de utilizar el andador
- Comprobar que el andador está totalmente desplegado
- Tener cuidado al transportar el andador plegado. Mantener las manos alejadas del mecanismo de plegado para evitar pellizcos.



El usuario no debe:

- Utilizar el andador como medio para transportar personas; no está diseñado como silla de ruedas
- Sentarse en el andador si los frenos no están en posición de bloqueo; ello podría provocar daños al usuario o a otras personas como resultado del movimiento imprevisto del andador
- 'Sentarse bruscamente' en el asiento del andador. Debe sentarse siempre en el andador de una manera suave y controlada. Solicitar ayuda si es necesario
- Colgar objetos en las palancas de freno o empuñaduras. Ello podría afectar al funcionamiento de los frenos y/o a la estabilidad del andador


Se han tomado todas las medidas para que su andador le proporcione un servicio seguro y fiable siempre y cuando se respeten las recomendaciones indicadas más arriba.

MONTAJE

Retirar el embalaje. El andador estará plegado tal como se indica más abajo. Desplegar en primer lugar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de apriete tal como se indica en la imagen.



Desplegar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de apriete.

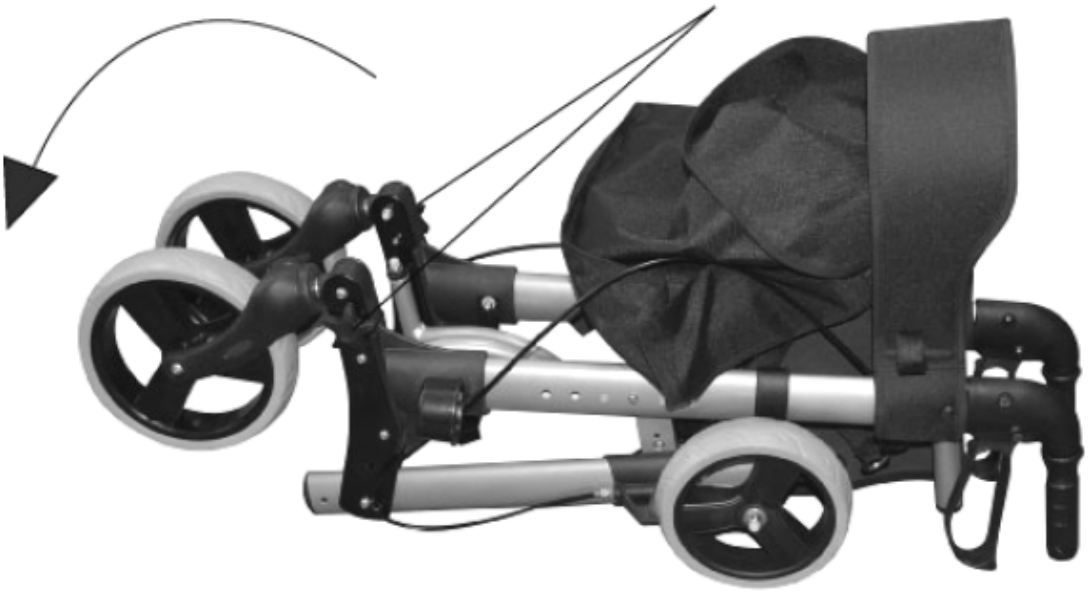


Comprobar que la rosca del mando de apriete penetra en el orificio de la rueda y que la rosca se introduce en el perno en el interior del bastidor.

Continuación:

Desplegar las patas traseras tal como se indica en la imagen y fijarlas con los mandos de apriete. Comprobar siempre que el mando de apriete encaje en el orificio de la pata y en la tuerca del bastidor.

Antes de utilizar el andador, comprobar siempre que estén bien apretados los mandos que sujetan las patas traseras y las ruedas.




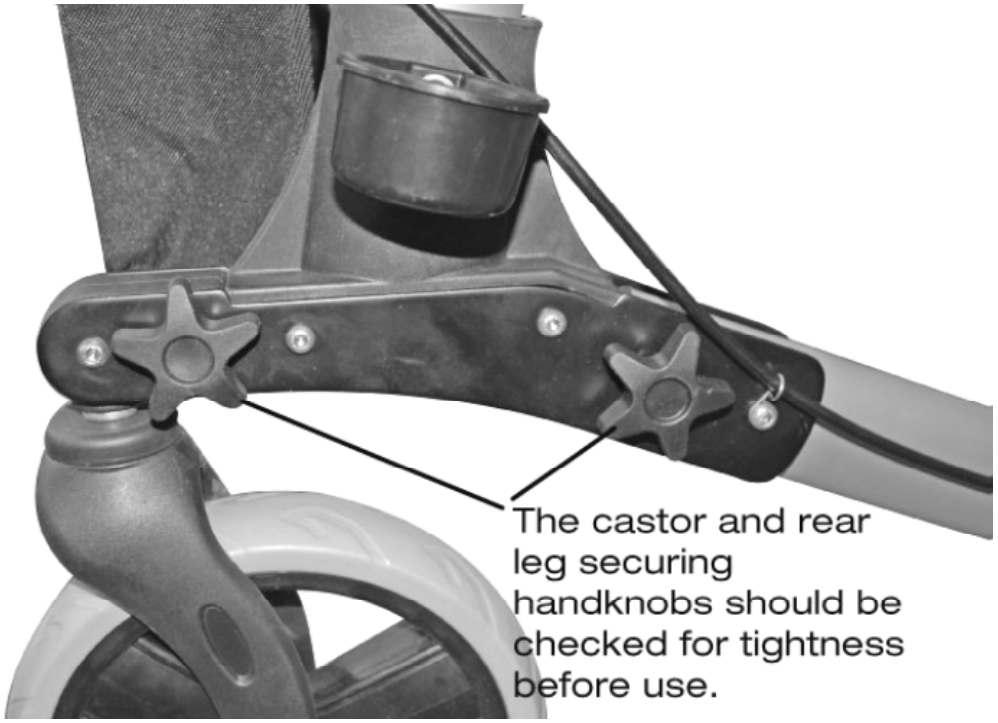


APERTURA Y PLEGADO

Para abrir el andador apretar cualquier lado de las barras tal como se indica más abajo. Deberá sentir que ambos lados se colocan correctamente con un 'clic'.

Apretar aquí

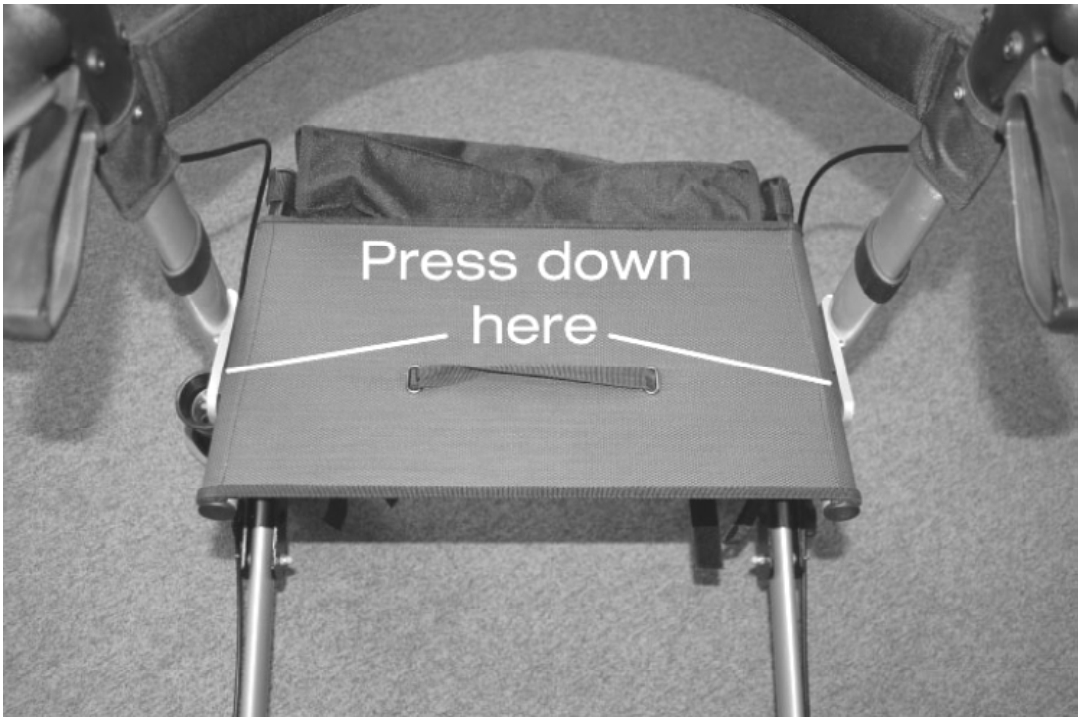

Para plegar el andador tirar suavemente de la correa en medio del asiento como se indica más abajo.

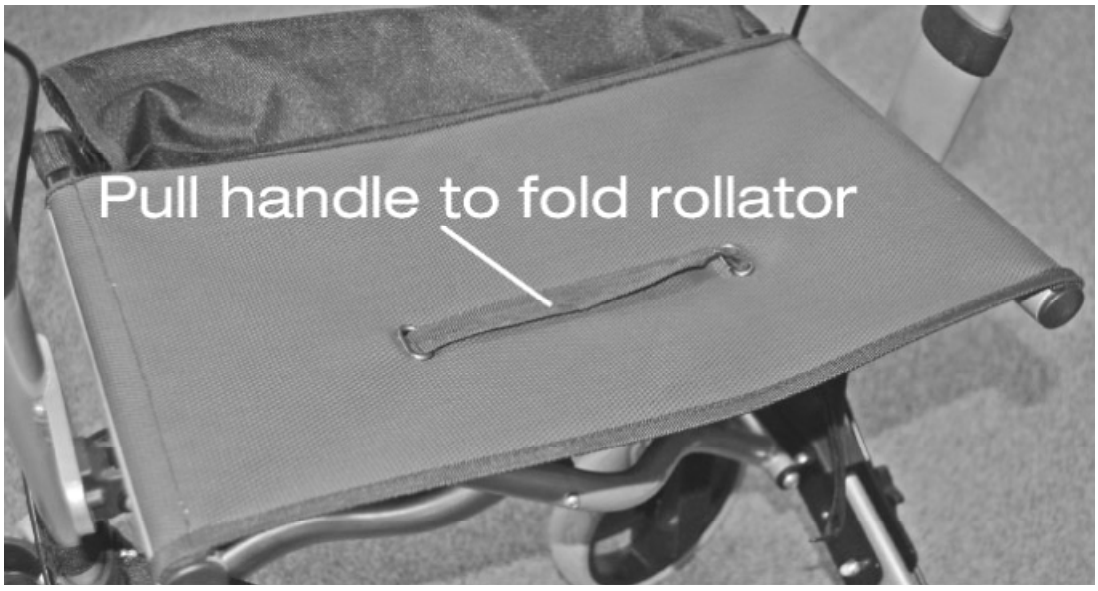

Tirar de la correa para plegar el andador

AJUSTE DEL MANILLAR

Se puede ajustar la altura de los manillares del andador para que se adapte a diferentes usuarios. Apretar simplemente el botón de resorte y ajustar a la altura deseada. Repetir la operación en el otro lado y asegurarse de que ambos manillares están bien fijados y colocados a la misma altura antes del uso.

El botón de resorte debe estar colocado en la misma posición en ambos lados.




FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE LOS FRENOS

1 – Levantar la palanca de freno para detener el andador.
2 – Apretar la palanca de freno para bloquear las ruedas traseras, levantar la palanca de freno para quitar el bloqueo.

Los frenos deben estar en posición de bloqueo cuando se va a utilizar el asiento; comprobar el bloqueo empujando hacia delante el andador.

Continuación:

El ajuste de los frenos se realiza de la siguiente manera:

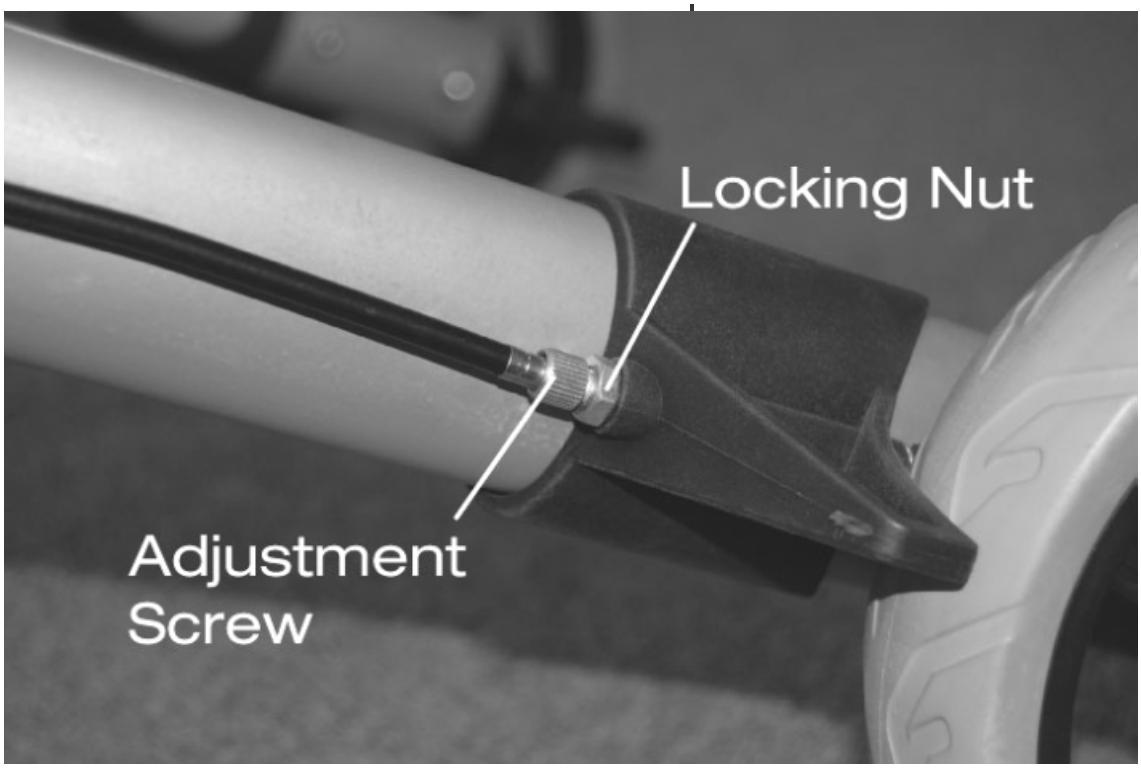

- Tuerca de bloqueo
- Tornillo de ajuste

Girar hacia la izquierda el tornillo de ajuste para aumentar la tensión de frenado y bloquear el ajuste girando la tuerca de bloqueo hacia la derecha manteniendo inmóvil el tornillo de ajuste.

Cuando el freno está en posición de bloqueo, reducir el ajuste del freno para permitir una ligera presión de frenado puede resultar ineficaz.

MANTENIMIENTO

Con el tiempo los cables del freno pueden alargarse; en ese caso, habrá que reemplazarlos. Acuda a su proveedor habitual.
Cada vez que se utilice el andador hay que comprobar que las ruedas están bien fijadas. Comprobar también que los frenos funcionan correctamente y que los manillares y mandos manuales están bien sujetos.
Si cualquier pieza del andador parece suelta o poco segura, deje de utilizar el andador hasta que sea examinado por un profesional autorizado.

LIMPIEZA

El andador puede limpiarse con un paño húmedo o esponja y agua caliente con jabón. Si fuera necesario se puede utilizar un limpiador doméstico bactericida.
Hay que vigilar que no queden restos de la limpieza en las manillas o en el asiento (cuando esté montado) ya que podrían resultar resbaladizos al uso. No utilizar estropajos ni utensilios abrasivos ya que podrían dañar la superficie del andador.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Términos estándar
Certificamos que su producto está garantizado por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no es transferible.

La garantía de servicio es responsabilidad del proveedor donde se adquirió el producto.

El fabricante no acepta responsabilidad por daños causados por uso incorrecto, alteraciones no autorizadas o incumplimiento de las instrucciones de este manual.

La garantía no incluye piezas que hayan estado sujetas a desgaste natural durante este periodo (neumáticos y piezas de plástico).

Modelo Nº:……

Serie Nº:……

Fecha de compra:……

Sello del proveedor

Apex Medical SL
C/ Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Bizkaia)
ESPAÑA
Telf: (+34) 94 470 64 08
Fax: (+34) 94 470 64 09
e-mail: info@apexmedical.es
http://www.apexmedicalcorp.com